

524,544

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. März 2004 (18.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/023110 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 15/05,
33/574

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008796

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. August 2003 (07.08.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 37 296.9 14. August 2002 (14.08.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **HEXAL GENTECH FORSCHUNGSGMBH**
[DE/DE]; Industriestr. 25, 83607 Holzkirchen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **DAHM, Michael, W.**
[DE/DE]; Gleimstrasse 2, 81677 München (DE).

(74) Anwälte: **KELLER, Günter** usw.; Lederer & Keller,
Prinzregentenstrasse 16, 80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.



WO 2004/023110 A1

(54) Title: METHOD FOR THE IMMUNOCYTOLOGICAL OR MOLECULAR DETECTION OF DISSEMINATED TUMOR
CELLS IN A BODY FLUID AND KIT THAT IS SUITABLE THEREFOR

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM IMMUNZYTologischen ODER MOLEKULAREN NACHWEIS VON DISSEMI-
NIERTEN TUMORZELLEN AUS EINER KÖRPERFLÜSSIGKEIT UND DAZU GEEIGNETER KIT

(57) Abstract: The invention relates to a method for enriching tumor cells of a body fluid, in which a cell-separating medium having
a specific density is covered with a layer of the body fluid and centrifuged. It is then determined whether the enriched cells express
an epithelial marker, e.g. a cytokeratin. Also disclosed is a kit that is suitable for carrying out said method.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anreicherung von Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit, wo-
rin ein Zellseparationsmedium spezifischer Dichte mit der Körperflüssigkeit überschichtet und zentrifugiert wird und anschließend
bestimmt wird, ob die angereicherten Zellen einen epithelialen Marker, z.B. ein Zytokeratin exprimieren. Ein für dieses Verfahren
geeigneter Kit wird ebenfalls bereitgestellt.

Verfahren zum immunzytologischen oder molekularen Nachweis von disseminierten Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit und dazu geeigneter Kit

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Nachweis von Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit sowie dazu geeignete Kits.

Nahezu alle soliden malignen Tumore haben das Potential zur Metastasenbildung. Der Prozeß der Metastasierung beinhaltet die Aussaat maligner Zellen als Mikrometastasen, zumeist auf dem Blut- bzw. Lymphweg in entfernte Organe und die Ausbildung autonomer Tochtergeschwülste. Das Ausmaß der Filiarisierung bestimmt die Prognose eines Tumorleidens.

Die Ansprüche von Tumurvorsorge- oder -nachsorgeprogrammen liegen in der Früherkennung von Primärtumoren bzw. Rezidiven oder von Metastasen noch bevor diese klinisch manifest werden. Dieses Ziel kann bislang mit den verfügbaren apparativen Techniken nicht zufrieden stellend erfüllt werden. Durch den Nachweis von zirkulierenden bzw. disseminierten Tumorzellen z.B. im peripheren Blut könnte frühzeitig, d.h. noch vor

dem Auftreten eines klinisch bemerkten Tumors, eine möglicherweise kurative Immunmodulations- oder Polychemotherapie eingeleitet werden. Die Quantifizierung der Tumorzellen im peripheren Blut vor und nach der Therapie stellt dabei eine wichtige Kontrolle dar.

Ein erfolgversprechender Ansatz zum Nachweis und zur Quantifizierung von disseminierten Tumorzellen besteht in der Bestimmung von epithelialen Markern wie Zytokeratinen in einer Körperflüssigkeit. Beispielsweise beschreiben Racila et al. in Proc Natl Acad Sci USA (1998) 95: 4589 einen Assay, mit dem disseminierte epitheliale Tumorzellen mittels monoklonaler Antikörper gegen Zytokeratin im peripheren Blut nachgewiesen werden können. Weiterhin existieren bereits kommerzielle molekulare Kitsysteme, die erlauben in einer Probe zum Beispiel die Zytokeratin 20-Expression mittels PCR zu bestimmen (Roche LightCycler-CK20 Quantification Kit).

Zytokeratine gehören zu der Familie von filamentösen Proteinen, die am Aufbau des Zytoskeletts von epithelialen Zellen beteiligt sind (Moll et al. in Cell (1982) 31: 11). Nachdem epitheliale Zellen im peripheren Blut normalerweise nicht vorkommen, wird postuliert, daß eine Zytokeratinexpression im Blut ein Surrogatmarker für das Vorhandensein von disseminierten Tumorzellen ist.

Im peripheren Blut können jedoch neben Tumorzellen auch andere Blutzellen wie polymorphkernige Leukozyten, speziell Granulozyten, epitheliale Marker wie Zytokeratine exprimieren (Jung et al. Br J Cancer (1999) 81: 870). Aufgrund dieser Tatsache muß vor dem Nachweis eines epithelialen Markers, wie z.B. einer Zytokeratinexpression als Surrogatmarker für disseminierte Tumorzellen im Blut eine Trennung dieser den epithelialen Marker exprimierenden, wie z.B. Zytokeratin exprimierenden Nicht-Tumorzellen von den epithelialen Marker, wie z.B. Zytokeratin exprimierenden Tumorzellen vorgenommen werden.

In den 60er- und 70er-Jahren, als Methoden wie beispielsweise FACS oder MACS noch nicht zur Verfügung standen, wurden Tumorzellen von hämatopoetischen Zellen aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte getrennt (J.A. Fleming et al., J. clin. Path. (1967), 20, 145). Entsprechend dieser Daten besitzen Tumorzellen eine spezifische Dichte von 1,040-1,080, während Erythrozyten eine höhere und Lymphozyten eine ähnliche Dichte aufweisen. Polymorphkernige Leukozyten weisen hingegen eine spezifische Dichte im Bereich von

1,060-1,080 auf und überschneiden sich somit mit der spezifischen Dichte von Tumorzellen. Eine vollständige Abtrennung der ebenfalls Zytokeratin-positiven Granulozyten von den Tumorzellen über deren Dichteunterschiede sollte somit nicht möglich sein. So zeigte auch die Verwendung einer Standardlösung zur Isolierung von Lymphozyten, wie z.B. Histoprep® (Sigma) mit einer Dichte von 1,077 g/ml, daß Granulozyten von gesunden Blutspendern mit einer Dichte von bis zu 1,077 g/ml Zytokeratin-positiv sind (Jung et al. Br J Cancer (1999) 81: 870).

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, ein vorteilhaftes Verfahren zum Nachweis von Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit zur Verfügung zu stellen.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß durch OncoQuick®, ein in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschriebenes Verfahren, Zytokeratin-exprimierende Nicht-Tumorzellen von Zytokeratin-exprimierenden Tumorzellen abgetrennt werden können. OncoQuick® (Greiner Bio One, Frickenhausen, Germany) verwendet als diskontinuierlichen Gradienten ein Zellseparationsmedium, das eine höhere Dichte als die zu untersuchende Körperflüssigkeit aufweist und mit der Körperflüssigkeit überschichtet wird. Durch Zentrifugation werden die Zellen ihrer spezifischen Zelldichte nach aufgetrennt und können in einzelnen Fraktionen abgenommen werden. Überraschend wurde gefunden, daß durch den spezifischen Dichtegrad des Zellseparationsmediums Zytokeratin-positive von Zytokeratin-negativen Blut-Zellen getrennt werden können, wobei sich die angereicherten Tumorzellen nach der Zentrifugation in der gleichen Fraktion befinden wie die Zytokeratin-negativen Blut-Zellen, so daß eine anschließend nachgewiesene Zytokeratinexpression in dieser Fraktion zweifelsfrei auf vorhandene Tumorzellen zurückgeführt werden kann.

Die vorliegende Erfindung betrifft daher ein Verfahren zum Nachweis von disseminierten Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit, worin

- (a) Tumorzellen angereichert werden, indem ein Zellseparationsmedium, das eine Dichte im Bereich von 1,055 bis 1,065 g/ml aufweist, mit der Körperflüssigkeit überschichtet wird und zentrifugiert wird; und
- (b) bestimmt wird, ob die angereicherten Zellen einen epithelialen Marker, wie z.B. ein Zytokeratin exprimieren.

Eine Expression eines epithelialen Markers kann dann als Surrogat für die Präsenz von disseminierten Tumorzellen gewertet werden.

Bei der Körperflüssigkeit, aus der Zytokeratin-positive Tumorzellen angereichert werden sollen, kann es sich um menschliche oder tierische Körperflüssigkeiten oder um eine Dispersion von Zellgewebe handeln. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Blut, insbesondere peripheres Blut wie venöses oder arterielles Blut, Pfortaderblut oder Blut aus einem zentralen venösen Katheter (ZVK), Lymphe, Urin, Exsudate, Transudate, Spinalflüssigkeit, Samenflüssigkeit, Speichel, Flüssigkeiten aus natürlichen oder unnatürlichen Körperhöhlen, Knochenmark und dispergiertes Körpergewebe. Bei den Flüssigkeiten aus natürlichen Körperhöhlen kann es sich beispielsweise um seröse Flüssigkeiten wie Peritoneal- und Pleuraflüssigkeiten handeln, bei den Flüssigkeiten aus unnatürlichen Körperhöhlen kann es sich beispielsweise um Flüssigkeiten aus Zysten handeln.

Bevorzugte Körperflüssigkeiten sind Blut, Knochenmark, Lymphe, seröse Flüssigkeiten aus Körperhöhlen sowie Urin, wobei Blut und Urin besonders bevorzugt sind. Urin eignet sich insbesondere zur Anreicherung von Zellen von Blasentumoren.

Die bevorzugteste Körperflüssigkeit ist jedoch peripheres Blut, das vorteilhaft in einer gerinnungshemmenden Substanz abgenommen und vor dem Überschichten des Zellseparationsmediums mit einem Verdünnungsmittel verdünnt wird. Als gerinnungshemmende Substanzen können beispielsweise EDTA oder Citrat bzw. Heparin oder CPD (Citrat, Phosphat, Dextrose) oder vergleichbare Substanzen eingesetzt werden. Als peripheres Blut eignet sich venöses oder arterielles Blut.

Bevorzugte Tumorzellen sind Tumorzellen, die von einem soliden Tumor stammen, insbesondere von Tumoren epithelialen Ursprungs und besonders bevorzugt Tumorzellen, die ein Zytokeratin exprimieren. Epitheliale Tumoren sind beispielsweise Karzinome, wie Karzinome der Brust, der Prostata oder gastrointestinale Tumoren, ohne sich jedoch darauf zu beschränken.

Die zu untersuchende Körperflüssigkeit wird, wie in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschrieben, entsprechend gängiger Standardprotokolle entnommen bzw. gesammelt. In Abhängigkeit von der Art der Körperflüssigkeit wird diese dann entweder zunächst mit einem Verdünnungsmittel, bevorzugt einem Puffer, verdünnt oder direkt unverdünnt in einem verschließbaren Zentrifugationsgefäß über das Zellseparationsmedium geschichtet.

Alternativ kann die Körperflüssigkeit zuvor bei beispielsweise 1.000 x g für ca. 10 Minuten zentrifugiert und nach Resuspension der Zellen in einem Puffer über das Zellseparationsmedium geschichtet werden. Der bevorzugt verwendete Puffer ist Dulbecco PBS.

Die Zentrifugation wird vorteilhaft bei ca. 500 bis 2.000 x g, bevorzugt bei ca. 1.000 x g über ca. 10 bis 30 Minuten, bevorzugt über 20–30 Minuten durchgeführt. Die Temperatur während der Zentrifugation beträgt vorzugsweise ca. 4°C. Dies bewirkt, daß die katalytische Aktivität von Proteasen, DNAsen bzw. RNAsen möglichst gering gehalten wird.

Als Zellseparationsmedium läßt sich im Prinzip jede geeignete Flüssigkeit gewünschter Dichte verwenden. Die Dichte liegt im Bereich von 1,055 bis 1,065 g/ml, vorzugsweise im Bereich von 1,059 bis 1,062 g/ml und ist am bevorzugtesten $1,060 \pm 0,0005$ g/ml. In einer besonderen Ausführungsform ist die Dichte kleiner als 1,065 g/ml, also 1,055 bis $< 1,065$ g/ml. Das Zellseparationsmedium sollte nicht mit der Körperflüssigkeit oder den darin enthaltenen Zellen reagieren. Vorteilhaft kann beispielsweise Ficoll® oder Percoll bzw. ein Percoll- oder Ficoll®-ähnliches Medium verwendet werden, wobei die Lösungen jeweils nach Anweisungen des Herstellers auf die gewünschte Dichte gebracht werden. Vorteilhafterweise wird die Dichte des Zellseparationsmediums mit Hilfe eines Dichtemeßgeräts (DMA 4500, Anton Paar, Österreich) bei der entsprechenden Arbeitstemperatur von 4°C eingestellt. Die in WO 00/46585 beschriebene Vorgehensweise zur Herstellung einer Lösung gewünschter Dichte ist durch Bezugnahme Teil der Offenbarung dieser Anmeldung. Das Zellseparationsmedium kann einen Farbstoff enthalten, der das Zellseparationsmedium von der darüberliegenden Körperflüssigkeit farblich unterscheidbar macht und dadurch die Lokalisation der Interphase vereinfacht.

Um einen möglichst einfachen Ablauf der Arbeiten zu sichern, kann, wie in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschrieben, in einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens die Zentrifugation in einem verschließbaren Gefäß durchgeführt werden, das durch eine Barriere, einen Filter oder ein Sieb, nachfolgend poröse Barriere oder Barriere genannt, in ein oberes und ein unteres Kompartiment geteilt ist, wobei das Zellseparationsmedium im unteren Kompartiment vorgelegt und die Körperflüssigkeit in das obere Kompartiment eingebracht wird.

Die Barriere hat vorzugsweise eine poröse Beschaffenheit, die es erlaubt, daß bei der Zentrifugation Flüssigkeiten sowie die korpuskulären Bestandteile des Blutes, wie die Zellen des roten und weißen Blutsystems, welche eine höhere Dichte als das vorgelegte Zellseparationsmedium haben, die poröse Barriere ungehindert passieren können. Dies hat zur Folge, daß das Zellseparationsmedium während der Zentrifugation durch die poröse Membran in das obere Kompartiment gedrängt wird und die Tumorzellen und Thrombozyten, welche eine geringere Dichte als das vorgelegte Zellseparationsmedium haben, auf einer Ebene oberhalb der Barriere zu liegen kommen.

Die poröse Barriere kann aus jedem geeigneten Material bestehen. Beispielsweise eignen sich Kunststoff, Metall, Keramik oder eine Mischung oder spezielle Legierung dieser Stoffe. Es kann aber auch jedes andere natürliche oder künstliche, geeignete Material eingesetzt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform besteht die poröse Barriere aus einem hydrophoben Material oder ist mit einem hydrophoben Material beschichtet.

In einem Zentrifugationsgefäß kann alternativ zur Barriere, wie in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschrieben, auch eine Klappe eingesetzt werden, die das Zentrifugationsgefäß analog zur Barriere in ein oberes und ein unteres Kompartiment unterteilt.

Diese Klappe hat eine Beschaffenheit, die es erlaubt, daß sie vor und nach der Zentrifugation dicht verschlossen ist und nur während der Zentrifugation durch die Zentrifugationskraft geöffnet wird. Während der Zentrifugation treffen bei geöffneter Klappe die Flüssigkeiten des unteren und des oberen Kompartiments zusammen. Dies hat zur Folge, daß die Zellen des roten und weißen Blutsystems, welche eine höhere Dichte als das vorgelegte Zellseparationsmedium haben, in das untere Kompartiment gelangen und das Zellseparationsmedium in das obere Kompartiment drängen. Dies hat den Effekt, daß die Tumorzellen, welche eine geringere Dichte als das vorgelegte Zellseparationsmedium haben, auf einer Ebene oberhalb der Klappe zu liegen kommen.

Die poröse Barriere, der Filter, das Sieb oder die Klappe kann eine Dicke von 0,5 - 10 mm, vorzugsweise von 1 - 5 mm aufweisen. Die poröse Barriere, der Filter, das Sieb oder die Klappe kann eine Porengröße von 20 - 100 μm , vorzugsweise 20 - 30 μm aufweisen.

Mit Hilfe der porösen Barriere oder Klappe kann die zu untersuchende Körperflüssigkeit in das Zentrifugationsgefäß gefüllt werden, ohne daß sie sich mit dem darunterliegenden

Zellseparationsmedium vermischt und somit die Anreicherung beeinträchtigen oder unmöglich machen kann.

Nach der Zentrifugation befinden sich die in der Körperflüssigkeit vorhandenen Tumorzellen in der Interphase des oberen Kompartiments des Zentrifugationsgefäßes. Die Interphase wird zwischen dem Trennmedium und der Restflüssigkeit einer Körperflüssigkeit oder einer Zellsuspension ausgebildet und enthält die angereicherten Tumorzellen. Bei der Restflüssigkeit handelt es sich beispielsweise bei der Verwendung von Blut als Körperflüssigkeit um Plasma, ein Plasma/PBS-, bzw. Plasma/Puffer-Gemisch, das die Proteine des Plasmas enthält. Die Flüssigkeit oberhalb der Interphase kann dann zu etwa 80% vorsichtig abgesaugt und verworfen werden.

Der verbleibende Überstand oberhalb der Barriere oder Klappe, in dem sich die Tumorzellen befinden, kann anschließend gesammelt und beispielsweise in ein frisches Zentrifugationsgefäß (vorzugsweise aus gegebenenfalls silikonisiertem Kunststoff und mit der gleichen Volumenkapazität wie das zuvor verwendete Zentrifugationsgefäß) überführt werden. Die poröse Barriere bzw. die geschlossene Klappe verhindert bei der Entnahme des verbleibenden Überstands ein Vermischen der Zellen des oberen und des unteren Kompartiments.

Vorteilhaft wird anschließend das obere Kompartiment des Zentrifugationsgefäßes beispielsweise, wie in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschrieben, zweimal mit einem Puffer nachgewaschen und dieser wird ebenfalls in das frische Zentrifugationsgefäß überführt. Nach einer weiteren Zentrifugation beispielsweise bei 1.000 x g über ca. 10 Minuten bei einer Temperatur von ca. 4°C können die gesammelten Zellen dann den Tumorzellnachweismethoden zugeführt werden. Als Waschpuffer eignet sich z.B. Dulbecco's PBS (3,9 mM EDTA; pH 8,0; ohne Ca/Mg). Weitere Waschpuffer sind in WO 99/40221 und WO 00/46585 offenbart.

Bei Verwendung eines Zentrifugationsgefäßes mit poröser Barriere bzw. Klappe wird, wie in WO 99/40221 und WO 00/46585 beschrieben, nach Entnahme der überstehenden Restflüssigkeit oberhalb der Interphase jedoch bevorzugt nicht nur die Interphase, sondern die gesamte verbliebene Flüssigkeit oberhalb der porösen Barriere entnommen, nicht weil sich zwischen Interphase und poröser Barriere bzw. Klappe noch weitere Zellen befinden, sondern weil durch die Abnahme die im Zellring enthaltenen Zellen leicht durchmischt

werden können. Um keine Zellen aus dem oberen Kompartiment zu verlieren wird dieses vorteilhaft noch zweimal mit einem Puffer (z.B. PBS mit 0,1% – 10% BSA) gewaschen.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können disseminierte Tumorzellen und insbesondere disseminierte Tumorzellen von epithelialen Tumoren aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte vollständig von den korpuskulären Bestandteilen von Körperflüssigkeiten wie z.B. den Zellen des roten und weißen Blutsystems getrennt, konzentriert und z.B. die Zytokeratinexpression der angereicherten Tumorzellen mittels immunzytologischer bzw. molekularbiologischer Tumorzellnachweisverfahren nachgewiesen werden. Im Sinne dieser Anmeldung exprimiert eine Zelle einen bestimmten epithelialen Marker, wie z.B. ein bestimmtes Zytokeratin, wenn sie das Protein des epithelialen Markers, wie z.B. ein Zytokeratin-Protein, oder die dafür kodierende mRNA enthält. Bevorzugte epitheliale Marker sind Zytokeratine. Zytokeratine, die erfindungsgemäß nachgewiesen werden können, sind Zytokeratine 1-20, bevorzugt 1, 4-8, 10-11, 13-20, besonders bevorzugt eine Kombination aus den Zytokeratinen 1, 4-8, 10-11, 13-20. Die bevorzugteste Kombination für den immunzytochemischen Nachweis sind Antikörper für Zytokeratin 8, 18, 19 und 20. Die bevorzugten Zytokeratine für den molekularen Nachweis sind Zytokeratin 18, 19 und 20, am bevorzugtesten ist Zytokeratin 20. Beispiele weiterer epithelialer Marker sind das Prostate Specific Antigen (PSA, Israeli et al., 1994, Cancer Res 54, 6306-6310), die Human Melanoma Antigen- (MAGE-) kodierende Genfamilie (De Plaen et al., 1994, Immunogenetics 40, 360-369, Hasegawa et al., 1998, Pathol Lab Med 122, 551-554), Mamma-spezifische Antigene wie MAS-385, SB-6 (Ross, et al., 1993, Blood 82, 2605-2610), MUC-1 (Brugger et al., 1999, J Clin Oncol 17, 1535-1544) und GA733-2 (Zhong et al., 1999, Tumordiagn. u. Ther. 20, 39-44), Adhäsionsmoleküle wie TFS-2, EPCAM (Racila et al., 1998, Proc Natl Acad Sci U S A 95, 4589-4594), oder CEACAM1 (Thies et al., 2002, J Clin Oncol 20, 2530-2536), Rezeptormoleküle wie Östrogen-Progesteron-Rezeptoren (Bitran et al., 1992, Dis Mon 38, 213-260), das Carcinoembryonic Antigen (CEA, Liefers et al., 1998, N Engl J Med 339, 223-228), das PRL-3 Protein, eine Tyrosin Phosphatase (Saha et al. 2001, Science 294, 1343-1346) oder Maspin, ein Protein aus der Familie der Serpine (Sabbatini et al., 2000, J Clin Oncol 18, 1914-1920) ohne sich darauf zu beschränken.

Die Methoden zum Nachweis einer Expression von epithelialen Markern, insbesondere der Zytokeratin-Expression umfassen das gesamte Spektrum der gängigen Diagnostik. Beispiele hierfür sind die mikroskopischen, immunzytologischen/immunzytochemischen,

biochemischen und/oder molekularbiologischen Verfahren. Beispielsweise kann die Expression von epithelialen Markern, insbesondere die Zytokeratin-Expression nach der Anreicherung direkt oder nach Zellkultur und Expansion der Tumorzellen durch morphologische, immunzytologische/immunzytochemische, biochemische und/oder molekularbiologische Verfahren nachgewiesen werden. Dabei können Zellbestandteile epithelialer Marker, insbesondere Zytokeratin-spezifische Zellbestandteile nachgewiesen werden, z.B. das Protein eines epithelialen Markers, wie z.B. das Zytokeratin-Protein selbst, spezifische Abschnitte von Chromosomen bis hin zu Nukleinsäuresequenzen, wie DNA, RNA und cDNA.

In einer Ausführungsform umfaßt die Bestimmung, ob die angereicherten Zellen einen epithelialen Marker, wie z.B. ein Zytokeratin exprimieren, daß man mRNA aus den angereicherten Zellen revers transkribiert und eine PCR mit wenigstens einem für den epithelialen Marker spezifischen Primer, z.B. einem Zytokeratin-spezifischen Primer durchführt. In einer anderen Ausführungsform bringt man die angereicherten Zellen mit einem monoklonalen Antikörper in Kontakt, der spezifisch für ein epitheliales Antigen, wie z.B. ein bestimmtes Zytokeratin ist, und weist anschließend an die Zellen gebundenen Antikörper nach. Diese Verfahren können in Einzel- oder Kombinationsanalyse durchgeführt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden Antikörper verwendet, die wie im Falle des murinen monoklonalen Antikörpers A45-B/B3 (Micromet, Deutschland) ein gemeinsames Epitop von verschiedenen Zytokeratinen (8, 18 und 19) erkennen. Es können auch Antikörper kombiniert werden, wie z.B. der Antikörper A45-B/B3 zusammen mit einem Zytokeratin 20-Antikörper. Im Falle einer molekularen Analyse können z.B. PCR-Untersuchungen mit zwei spezifischen Primern bzw. Primerpaaren durchgeführt werden, die für zwei unterschiedliche epitheliale Marker spezifisch sind. Alternativ können die o.a. Untersuchungen auch mit einem anderen Antikörper bzw. mit einem anderen Primer bzw. Primerpaar, die für einen weiteren epithelialen Marker spezifisch sind, wiederholt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden "custom made" Mikroarrays verwendet, mit denen unterschiedliche epitheliale Marker in Kombination mit tumorspezifischen Markern wie z.B. der Telomerase, in einem Untersuchungsschritt nachgewiesen werden können.

Beispiele direkter Nachweisverfahren sind u.a. sämtliche Formen der Mikroskopie einschließlich der Färbung von Zellbestandteilen. Ein Beispiel direkter Färbung ist die Färbung durch spezifische Antikörper, die gegen Zytokeratine gerichtet sind und an denen

Markierungssignale wie z.B. fluoreszierende Farbstoffe gekoppelt sind. Nachweisverfahren sind u.a. Durchflußzytometrie oder FACS (Fluorescence activated cell sorting), ELISA und Western Blotting. Weitere Verfahren zum Nachweis von epithelialen Markern, wie z.B. von Zytokeratinen sind u.a. die Detektionsverfahren von Nukleinsäuren mit Hilfe von markierten Sonden, z. B. FISH, in situ Hybridisierung, Northern, South-Western und Southern Blotting oder differential display sowie u.a. die Amplifikationsverfahren von Nukleinsäuren u.a. die PCR, RT-PCR, in situ RT-PCR, Real-Time PCT und NASBA. Dabei können Reagenzien zum Einsatz kommen, die mehrere epitheliale Marker, wie z.B. Zytokeratine nachweisen, also spezifisch für eine Gruppe von epithelialen Markern, wie z.B. Zytokeratinen sind. Es können aber auch Reagenzien verwendet werden, die nur einen bestimmten epithelialen Marker, wie z.B. nur ein bestimmtes Zytokeratin spezifisch nachweisen, z.B. ein monoklonaler anti-CK-20-Antikörper oder CK-20-spezifische Primer zum spezifischen RT-PCR-Nachweis von CK-20. Anti-Zytokeratin-Antikörper sind kommerziell erhältlich oder können nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden. Primer können aus den cDNA-Sequenzen der verschiedenen Zytokeratine abgeleitet werden. Die cDNA-Sequenz von CK-20 ist in der NCBI Datenbank <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> unter der Accession No. BC031559 (Homo sapiens, cytokeratin 20, clone MGC:35423, IMAGE:5189289, mRNA, complete cds) hinterlegt.

Die angeschlossenen Nachweisverfahren können auf folgenden Gebieten zum Einsatz kommen:

Der Nachweis der Expression von epithelialen Markern, wie z.B. den der Zytokeratin-Expression in den angereicherten Zellen kann direkt als Tumormarker eingesetzt werden. In Staginguntersuchungen kann die Anzahl der nachgewiesenen disseminierten Tumorzellen mit dem klinischen Bild korreliert und ein individuelles Tumorstaging festgelegt werden. Nach Entfernung des Primärtumors kann der Patient regelmäßigen Rezidivkontrollen unterzogen und bei positivem Befund sofort behandelt werden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind der Nachweis von residualen Tumorzellen im Knochenmark von Patienten, die sich einer Hochdosis-Strahlentherapie unterziehen müssen oder von disseminierten Tumorzellen im Rahmen von neuen Therapieansätzen, sowie ex-vivo und in-vivo Gentherapieansätzen.

Einen besonderen Stellenwert wird dem Verfahren im Rahmen von Tumurvorsorgeuntersuchungen beigemessen, da mit einer erheblich früheren Diagnose

und bei sofortiger Therapie mit längeren Überlebensraten zu rechnen ist. Weitere Anwendungen liegen in der Tumorstoffwechselherstellung und der Gentherapie.

Die vorliegende Erfindung betrifft somit auch ein Verfahren zum Nachweis von Tumorzellen in einer Körperflüssigkeit, worin die Tumorzellen, wie vorstehend beschrieben, aus einer Körperflüssigkeit angereichert und bevorzugt gleichzeitig unerwünschte Zellen in einem hohen Maße abgereichert und disseminierte einen oder mehrere epitheliale Marker exprimierende Tumorzellen, wie z.B. Zytokeratin-exprimierende Tumorzellen mittels immunzytologischer oder molekularbiologischer Techniken nachgewiesen werden.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Kit zur Anreicherung von disseminierten Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit, der zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist. Hierzu umfaßt der Kit das in WO 99/40221 und WO 00/46585 offenbarte Zellseparationsmedium und Mittel zum Nachweis der Expression von epithelialen Markern, wie z.B. eines Zytokeratins, sowie gegebenenfalls ein Zentrifugationsgefäß und/oder Waschpuffer in gegebenenfalls konzentrierter Form zum Waschen der angereicherten Zellen. Die bevorzugten Ausführungsformen der Bestandteile des Kits entsprechen den für das erfindungsgemäße Verfahren beschriebenen.

Um das routinemäßige Arbeiten mit dem Kit zu erleichtern, kann das Zentrifugationsgefäß eine poröse Barriere oder Klappe aufweisen, die das Zentrifugationsgefäß in ein oberes und ein unteres Kompartiment unterteilt. Die vorteilhaften Ausführungsformen des Zentrifugationsgefäßes entsprechen den oben für das erfindungsgemäße Verfahren beschriebenen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein immunzytologischer Kit zum Nachweis der aus einer Körperflüssigkeit angereicherten Tumorzellen, der zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist. Hierzu umfaßt der Kit spezifische monoklonale Antikörper, mit denen epitheliale Marker exprimierende, wie z.B. Zytokeratin exprimierende Tumorzellen immunzytologisch nachgewiesen werden können. Bei den Antikörpern kann es sich solche handeln, die mehrere Zytokeratine erkennen, oder um solche, die nur ein Zytokeratin erkennen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein molekularbiologischer Kit zum Nachweis der aus einer Körperflüssigkeit angereicherten Tumorzellen, der zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist. Hierzu umfaßt der Kit spezifische Primer und gegebenenfalls Enzyme, mit denen epitheliale Marker exprimierende, wie z.B. Zytokeratin exprimierende Tumorzellen mittels Reverse Transkriptase-Polymerase Kettenreaktion (RT-PCR) oder mittels Real Time- Polymerase Kettenreaktion (PCR) nachgewiesen werden können. Vorzugsweise handelt es sich um Primer, die nur eine cDNA eines epithelialen Markers, bzw. nur eine Zytokeratin-cDNA spezifisch amplifizieren, besonders bevorzugt um Primer die nur CK-18-, CK-19- und/oder CK-20-cDNA spezifisch amplifizieren, am bevorzugtesten um Primer, die nur CK-20-cDNA spezifisch amplifizieren.

Das erfindungsgemäße Verfahren bietet den Vorteil, daß epitheliale Marker-positive wie z.B. Zytokeratin-positive Nicht-Tumorzellen einfach und sicher von den anzureichernden Tumorzellen abgetrennt werden, so daß in anschließenden Nachweisverfahren keine falsch-positiven Ergebnisse durch epitheliale Marker-positive wie z.B. Zytokeratin-positive Nicht-Tumorzellen erhalten werden. So können Nicht-Tumorzellen, die wenigstens eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren, von Tumorzellen, die wenigstens eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren, abgetrennt werden. Insbesondere können CK-20-positive Nicht-Tumorzellen von CK-20-positiven Tumorzellen abgetrennt werden. Darüber hinaus sind nur wenige Arbeitsschritte für die Anreicherung und Isolierung von Tumorzellen aus Körperflüssigkeiten notwendig, so daß dadurch die Prozessierung von größeren Mengen von Probenmaterial möglich wird. Die Kosten für die notwendigen Materialien sind beispielsweise gegenüber der Verwendung spezifischer Antikörper und der anschließenden Trennung mittels geeigneter Apparaturen signifikant geringer.

Der unwahrscheinliche Fall, daß ein falsch positives Ergebnis erhalten wird, kann zusätzlich dadurch ausgeschlossen werden, daß ein bestimmter Wert festgesetzt wird, ab dem ein Ergebnis als positiv gewertet wird ("cut off"). Zum Beispiel kann ein Signal nach RT-PCR insbesondere nach Real-Time PCR mit einer gespikten Probe mit 2-10 Zellen/ml (z.B. mit 2, 4, 6, 8 oder 10 Zellen/ml) als Mindestsignal für einen positiven Nachweis festgelegt werden. Die Real-Time PCR bietet die Möglichkeit, mittels einer Quantifikation Software (Roche) die Kopiennummer des Amplifikats zu bestimmen. Liegt der Wert des Amplifikats über einer zuvor ermittelten Mindestkopiennummer, kann das Ergebnis als positiv gewertet werden. Ähnlich kann mit custom made Mikroarrays verfahren werden,

indem die Intensität des ermittelten Signals über einem zuvor bestimmten Intensitätswert liegen muß.

Figur 1 zeigt eine hämatologische Analyse (Sysmex SE-9000) von 10 ml peripherem Blut gesunder Probanden, das mit Ficoll® (a,b) oder OncoQuick® (c,d) aufgereinigt wurde. a) und c) sind ungespikete Proben, b) und d) sind mit Tumorzellen gespikete Proben. Die ungespiketen Blutproben enthielten 1.8×10^7 Blutzellen nach Ficoll®- (a) und 9.5×10^4 nach OncoQuick®-Anreicherung (c). Nachdem zu den Proben 2.7×10^6 Tumorzellen gespiked worden waren, bildet die Tumorzellfraktion (hauptsächlich in der von der Ellipse gekennzeichneten Region) die Hauptfraktion nach der OncoQuick®-Anreicherung (d), während die Tumorzellen, nach Ficoll®-Anreicherung (b) mit einer großen Anzahl MNCs angereichert werden. HF= "high frequency", DC= "direct current").

Figur 2 zeigt den immunzytologischen Nachweis mit dem Panzytokeratin-Antikörper A45-B/B3 von 10 ml peripherem Blut gesunder Probanden, mit 100 gespiketen Tumorzellen nach einer Anreicherung mit Ficoll® (a) oder OncoQuick® (b). Nach einer Anreicherung mit OncoQuick® wurde die gesamte angereicherte Zellfraktion mit einer erhöhten Tumorzellichte auf 1-2 Objektträger zentrifugiert, im Vergleich zu 50 Objektträgern nach einer Ficoll®-Anreicherung.

Figur 3 zeigt eine CK-20 RT-PCT von Blutproben, die mit 1 bis 10^4 Tumorzellen gespiked wurden, nach einer Anreicherung mit Ficoll® (a) oder OncoQuick® (b). Während mit OncoQuick® 10 Tumorzellen in 30ml Blut nachgewiesen werden können, sind Präparationen mit Ficoll® auf eine Menge von nur 10ml Blut limitiert. Wasser (W), Negativ-Kontrollen (N) und DNA Längen Standard VII (Roche, Deutschland) (S).

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher.

Beispiel 1

Dieser Versuch wurde durchgeführt, um festzustellen, ob CK20 mRNA-exprimierende Nicht-Tumorzellen durch OncoQuick® erfolgreich abgereichert werden können.

OncoQuick® ist ein kommerziell erhältliches Zellseparationssystem, das folgende Merkmale aufweist: Es umfaßt ein 50 ml Zentrifugationsgefäß, das durch eine poröse Barriere in 2 Kompartimente unterteilt ist. Das untere Kompartiment enthält das Zellseparationsmedium mit einer Dichte im erfindungsgemäßen Bereich. In das obere Kompartiment kann die zu untersuchende Körperflüssigkeit eingefüllt werden.

Der Versuch wurde an einer Gruppe von 70 gesunden Probanden durchgeführt und die Auswertung mit der sensibelsten Amplifikationsmethode, der Real Time PCR vorgenommen. Von insgesamt 70 gesunden Probanden wurde jeweils eine Gesamtmenge von 30ml peripheren Blutes abgenommen und in 2 gleiche Aliquote von 15ml aufgeteilt. Ein Aliquot wurde jeweils mit Ficoll® (Leucosep® Greiner Bio One), das andere Aliquot mit OncoQuick® (Greiner Bio One) nach Angaben des Herstellers aufgereinigt. 50 ml Leucosep®-Zentrifugationsgefäße enthalten wie OncoQuick® eine poröse Barriere, die das Röhrchen in ein oberes und in ein unteres Kompartiment unterteilt. Im unteren Kompartiment sind 15 ml Ficoll® vorgelegt. 10 ml Blut wurde in das Zentrifugationsgefäß eingebracht und bei 1000g für 10 Minuten bei Raumtemperatur zentrifugiert. Analog wurden 10 ml Blut in ein vorgekühltes OncoQuick®-Zentrifugationsgefäß eingebracht und bei 1600g für 20 Minuten bei 4°C zentrifugiert. Das gesamte obere Kompartiment wurde entnommen und in ein frisches 50ml Zentrifugationsgefäß überführt. Die gesammelten Zellen wurden einmal mit PBS (Böhringer, Deutschland) bei 500g für 15 Minuten (Ficoll®) und mit dem OncoQuick®-Waschpuffer bei 200g für 12 Minuten (OncoQuick®) bei 4°C gewaschen. Die gewaschenen Zellen wurden dann gesammelt und die totale RNA mit dem High Pure RNA Isolations Kit (Roche, Deutschland) nach Angaben des Herstellers extrahiert. Die RNA wurde dann in 70 µl eluiert. 10 µl der eluierten RNA wurde dann in eine 20 µl Reverse Transkriptase Reaktion des LightCycler-CK20 Quantification Kit (Roche, Deutschland) überführt und anschließend 5 µl in die Real-Time PCR nach Angaben des Herstellers eingesetzt. Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, daß in den mit Ficoll® angereicherten Proben 8 individuelle Proben CK-20 positiv waren. Im Vergleich dazu waren die mit OncoQuick® aufgereinigten Proben negativ.

Beispiel 2

1. Material und Methoden

Dichtegradientenzentrifugation der Blutproben

Für alle Experimente wurde Tumor-freien Patienten mit EDTA-beschichteten 10 ml Monovetten (Sarstedt, Deutschland) peripheres venöses Blut abgenommen, das innerhalb von zwei Stunden nach Blutabnahme verarbeitet wurde. Alle Blutproben wurden mit Zustimmung der Patienten gemäß Institutsrichtlinien und nach IRB-Genehmigung gewonnen. Alle Experimente wurden zehnmal durchgeführt und Mittelwerte wurden aus den Ergebnissen berechnet. Mononukleäre Zellen (MNCs) wurden aus Gesamtblut durch Ficoll®- (Biochrom Deutschland) und durch OncoQuick®- (Greiner BioOne Deutschland) Dichtegradientenzentrifugation abgetrennt.

OncoQuick® - Dichtegradientenzentrifugation

Vorgekühlte 50 ml Zentrifugenröhrchen, die 15 ml Separationsmedium unterhalb einer porösen Barriere, die ein oberes und ein unteres Kompartiment trennt, enthielten, wurden mit 10 bis 30 ml Blut gefüllt und bei 1600 g für 20 min bei 4°C in einem Außschwingrotor (Hettich, Deutschland) zentrifugiert. Das Gesamtvolumen des oberen Kompartiments einschließlich der Interphase mononukleärer Zellen wurde in ein frisches Zentrifugenröhrchen gegossen. Die poröse Barriere verhinderte jegliche Kontamination der separierten MNCs mit der Fraktion an pelletierten Blutzellen. Danach wurden die Zellen mit Waschpuffer bei 200 g für 12 Minuten bei 4°C zentrifugiert, der Überstand wurde abgesaugt. Die pelletierten Zellen wurden zur weiteren Untersuchung verwendet.

Ficoll® Dichtegradientenzentrifugation

50 ml Zentrifugenröhrchen mit einer porösen Filterscheibe bei 15 ml (Leucosep®, Greiner BioOne Deutschland) enthaltend 15 ml Ficoll® wurden mit 10 ml Blut gefüllt und bei 10.000 g für 10 min bei Raumtemperatur zentrifugiert. Um die MNCs zu gewinnen, wurde das gesamte Volumen des oberen Kompartiments des Leucosep®-Röhrchens in ein frisches 50 ml Zentrifugenröhrchen gegossen. Die gewonnenen Zellen wurden mit PBS (Böhringer, Deutschland) bei 500 g für 15 min bei 4°C gewaschen. Der Überstand wurde abgesaugt und für den weiteren Nachweis disseminierter Tumorzellen verwendet. Die niedrigen g-Werte, die für die Waschschrte eingesetzt wurden (500 g für Ficoll® und

200 g für OncoQuick®) wurden gewählt, um die Zellintegrität für die immunzytologischen Untersuchungen zu gewährleisten.

Abreicherung von Blutzellen nach Dichtegradientenzentrifugation

Zur Quantifizierung der abgetrennten Zellen durch die beiden Dichtegradientenzentrifugationsmethoden wurde von 10 Tumor-freien und gesunden Probanden 30 ml Blut abgenommen und in drei 10 ml Aliquote aufgeteilt. Für jeden Patienten wurde ein Aliquot mit Ficoll® und ein Aliquot mit OncoQuick® vorbereitet. Das dritte Aliquot blieb unbearbeitet. Die durch die beiden Zentrifugationsmethoden abgetrennten Zellen und die unbearbeitete Gesamtblutprobe wurden mit der hämatologischen Analysevorrichtung Sysmex SE-9000 (Sysmex Deutschland), die klinisch zur Blutzellendifferenzierung eingesetzt wird, analysiert. "Scattergraphen" wurden durch Widerstandsmessung mit Gleichstrom und hochfrequentem Wechselstrom erstellt, wodurch die dreidimensionale Verteilung von Zellgröße und interner Zelldichte gezeigt wird.

Tumorzellgewinnung nach Dichte-zentrifugation

Um den Anteil an gewonnenen Tumorzellen nach Präparation von Gesamtblut mit Ficoll® und OncoQuick® zu bestimmen, wurden "Spiking-Experimente" mit der colorektalen Karzinomzelllinie HT-29 durchgeführt. Aus zehn tumorfreien Probanden wurde jeweils 40 ml Blut abgenommen und in vier 10 ml Aliquote aufgeteilt. Zwei Aliquote eines jeden Probanden wurden mit $2,7 \times 10^6$ oder $2,7 \times 10^5$ Tumorzellen gespiked während die übrigen zwei Aliquote nicht manipuliert wurden. Ein Paar aus ungespiketer und gespiketer Blutprobe wurde mit Ficoll® bearbeitet, das andere Paar mit OncoQuick®, und mit der hämatologischen Analysevorrichtung untersucht. Die Differenz in der Gesamtzahl an MNCs zwischen den gespiketen und ungespiketen Proben wurde den gespiketen Tumorzellen zugerechnet. Ein Vergleich der Anzahl an gespiketen Tumorzellen mit dieser berechneten Anzahl an gewonnenen Tumorzellen nach Ficoll®- oder OncoQuick®-Behandlung diente als ein Maß für den Anteil an gewonnenen Tumorzellen mit der jeweiligen Methode.

Nachweis disseminierter Tumorzellen

Der Tumorzellnachweis wurde durch Immuncytochemie (ICC) und Reverse Transkriptase Polymerase Kettenreaktion (RT-PCR) durchgeführt. Um die Nachweisrate gespiketer Tumorzellen in Blut, das mit entweder Ficoll® oder OncoQuick® behandelt worden ist, zu

bestimmen, wurden 10 ml Blutproben von Tumor-freien Probanden mit einer ansteigenden Anzahl an Tumorzellen (0, 10, 100 und 1000 Tumorzellen für RT-PCR Nachweis und 100 und 1000 Tumorzellen für ICC Nachweis) gespiked.

Immuncytochemie

Die Gesamtzahl an abgetrennten MNCs mit und ohne gespikete Tumorzellen wurde durch Mikroskopie mit einer Neubauer Zellkammer bestimmt. Maximal 200.000 Zellen wurden auf jedes Deckgläschen zentrifugiert. Die so durch Zytozentrifugation erhaltenen Präparate wurden mit Aceton 10 min bei Raumtemperatur fixiert, luftgetrocknet, und dann mit antikörperfreiem humanem Serum 25 min vorinkubiert, um unspezifische Antikörperbindung zu blocken. Zytokeratin-positive Zellen wurden durch den Maus Anticytokeratin monoklonalen Antikörper (MAb) A45-B/B3 (Micromet, Deutschland) identifiziert, der ein gemeinsames Epitop auf verschiedenen Cytokeratin-Proteinen einschließlich Cytokeratin 8, 18 und 19 nachweist, und mit dem monoklonalen Antikörper CK-20 (Dako Deutschland), der gegen Cytokeratin 20 (CK 20) gerichtet ist. Nach einer 45-minütigen Inkubation mit dem Primärantikörper wurde die Reaktion mit der Alkalische Phosphatase-Antialkalische Phosphatase (APAAP) - Technik entwickelt. Die Anzahl an Zytokeratin-positiven Zellen wurde mikroskopisch von zwei Personen unabhängig voneinander bestimmt.

Cytokeratin-20 RT-PCR

Die Isolierung von Gesamt-RNA aus den Zellpellets, die durch Ficoll®- oder OncoQuick®-Behandlungen erhalten wurden, wurde mit dem "High Pure RNA Isolation Kit" (Roche, Deutschland) durchgeführt. Die Amplifizierung von CK-20 mRNA (Moll et al., Differentiation 1993; 53: 75 - 93) wurde in einer einstufigen RT-PCR mit dem "Titan One Tube RT-PCR Kit" (Roche, Deutschland) durchgeführt. Die PCR wurde in einem Reaktionsvolumen von 50 µl einschließlich höchstens 29,5 µl Matrizen RNA für OncoQuick®-Proben und höchstens 10 µl Matrizen-RNA für Ficoll®-Proben durchgeführt, um RNA-Überladung zu vermeiden. Mit einem Set CK-20 spezifischer Primer, die von Funaki et al., Br. J. Cancer 1998; 77: 1327 - 1332 beschrieben wurden, wurde eine RT-PCR Amplifikation für alle Proben in einem Varius-V Thermocycler (Landgraf, Deutschland) durchgeführt, wie in einer früheren Studie beschrieben (Rosenberg et al., J Clin Oncol 2002; 20: 1049 - 1055). Eine effiziente Amplifikation wurde durchgehend von allen Proben erhalten und mit einer β2-Microglobulin RT-PCR kontrolliert. Die PCR Produkte wurden auf einem 2% Agarosegel aufgetrennt. Für geeignete Negativkontrollen

wurde die Matrizen-RNA durch Nuklease-freies Wasser ersetzt. Als Positivkontrolle wurde extrahierte Gesamt-RNA aus der kolorektalen Karzinomzelllinie HT-29 analysiert.

Spezifität von CK-20 RT-PCR in Kombination mit OncoQuick®

Um die Spezifität von CK-20 RT-PCR für den Nachweis von Tumorzellen zu bestimmen, wurden Blutproben von 30 Tumor-freien Patienten untersucht, die keine Anzeichen einer Krebserkrankung zeigten. 30 Patienten mit Knochenbrüchen wurde jeweils 30 ml Blut abgenommen. Die Gesamtblutmenge wurde in zwei Hälften geteilt zur weiteren Dichtegradientenzentrifugation mit OncoQuick® und Ficoll®. CK-20 RT-PCR wurde nach RNA Extraktion aus allen Blutproben durchgeführt.

Zusätzlich wurden 15 ml Blutproben von 5 Tumor-freien Patienten auf CK-20 Expression in der Zellfraktion oberhalb der porösen Barriere und in der Zellfraktion unterhalb der porösen Barriere nach OncoQuick® oder Ficoll® Dichtegradientenzentrifugation untersucht. Die Zellfraktionen oberhalb und unterhalb der porösen Barriere der Blutproben wurden nach Dichtegradientenzentrifugation getrennt, Gesamt-RNA wurde extrahiert und durch CK-20 RT-PCR und Real-time CK-20 LightCycler RT-PCR (Soong et al., Clin Cancer Res 2001; 7: 3423 - 3429) zur Quantifizierung von CK-20 - Expression untersucht. Zusätzlich wurde in der Zellfraktion unterhalb der porösen Barriere, die die Erythrozyten enthält, eine Lyse der Erythrozyten durchgeführt.

Klinische Evaluierung

Um den klinischen Nutzen von OncoQuick® zu validieren, wurden schließlich 37 Patienten, die zum Staging von Magen-Darm-Krebs untersucht wurden, untersucht. Von jedem Patienten wurden zwei Proben von 20 ml peripherem Blut präoperativ gewonnen. Alle Blutproben wurden mit dem Dichtegradienten OncoQuick® zentrifugiert. Der Nachweis zirkulierender Tumorzellen wurde durch Zytokeratin CK-20 RT-PCR durchgeführt. Die Nachweisraten wurden mit der Präsenz von Fernmetastasen verglichen und statistisch durch den "chi-square-Test" bei einem Signifikanzwert von $p \leq 0,05$ analysiert.

2. Ergebnisse

Quantifizierung und Charakterisierung der angereicherten Zellfraktion

Abreicherung von Blutzellen nach Dichtegradientenzentrifugation

Die Charakterisierung der verschiedenen Blutzellfraktionen von 10 ml unbehandeltem Gesamtblut durch die hämatologische Analysevorrichtung ergab eine mittlere Zellzahl von $6,0 \times 10^7$ weißen Blutkörperchen (WBC), $4,6 \times 10^{10}$ Roten Blutkörperchen (RBC) und $2,3 \times 10^9$ Blutplättchen. Die WBC-Differenzierung ist in Tabelle 1 gezeigt.

Tabelle 1 zeigt den Vergleich der Zellzahl aus der angereicherten Interphase von 10 ml peripherem Blut gesunder Probanden nach einer Anreicherung mit Ficoll® und OncoQuick®. Das Verhältnis von Zellzahl vor und nach Dichtegradientenanreicherung bildet den Abreicherungsfaktor.

	10 ml Blut n = 10 Zellzahl	Ficoll-Präparation n = 10 Zellzahl Abreicherung	OncoQuick-Präparation n = 10 Zellzahl Abreicherung
Rote Blutkörperchen ± SD	$4,6 \times 10^{10}$ $\pm 3,5 \times 10^9$	$8,0 \times 10^7$ $\pm 2,8 \times 10^7$ 575-fach	$3,6 \times 10^6$ $\pm 1,7 \times 10^6$ 12778-fach
Blutplättchen ± SD	$2,3 \times 10^9$ $\pm 8,6 \times 10^8$	$4,1 \times 10^8$ $\pm 1,7 \times 10^8$ 5,6-fach	$1,6 \times 10^8$ $\pm 5,2 \times 10^7$ 14,4-fach
Weißer Blutkörperchen ± SD	$6,0 \times 10^7$ $\pm 1,6 \times 10^7$	$1,6 \times 10^7$ $\pm 5,2 \times 10^6$ 3,8-fach	$9,5 \times 10^4$ $\pm 1,5 \times 10^4$ 632-fach
Lymphozyten ± SD	$1,9 \times 10^7$ $\pm 1,1 \times 10^7$	$1,1 \times 10^7$ $\pm 4,9 \times 10^6$ 1,7-fach	$2,7 \times 10^4$ $\pm 1,7 \times 10^4$ 704-fach
Monozyten ± SD	$5,0 \times 10^6$ $\pm 1,5 \times 10^6$	$3,5 \times 10^6$ $\pm 3,4 \times 10^5$ 1,4-fach	$1,0 \times 10^4$ $\pm 3,0 \times 10^3$ 500-fach
Neutrophile ± SD	$3,5 \times 10^7$ $\pm 7,0 \times 10^6$	$8,7 \times 10^5$ $\pm 4,0 \times 10^5$ 40-fach	$5,4 \times 10^4$ $\pm 2,5 \times 10^4$ 648-fach
Eosinophile ± SD	$9,4 \times 10^5$ $\pm 6,2 \times 10^5$	$4,9 \times 10^4$ $\pm 8,7 \times 10^4$ 19-fach	$2,0 \times 10^3$ $\pm 2,8 \times 10^3$ 470-fach
Basophile ± SD	$3,2 \times 10^5$ $\pm 3,3 \times 10^5$	$2,0 \times 10^5$ $\pm 1,8 \times 10^5$ 1,6-fach	$4,0 \times 10^3$ $\pm 3,2 \times 10^3$ 80-fach

Die Interphase, die aus 10 ml Blut nach Ficoll®-Behandlung wiedergefunden wurde, bestand aus $1,6 \times 10^7$ WBC, $8,0 \times 10^7$ RBC und $4,1 \times 10^8$ Blutplättchen. Die gesammelte Interphase nach OncoQuick®-Behandlung von 10 ml Blut bestand aus $9,5 \times 10^4$ WBC, $3,6 \times 10^6$ RBC und $1,6 \times 10^8$ Blutplättchen. Durch Ficoll®-Zentrifugation wurde die Anzahl an WBC um Faktor 4 reduziert, die Anzahl an RBC um Faktor 575 und die der Blutplättchen um Faktor 6 verglichen mit den unbehandelten Gesamtblutfractionen. Zum Vergleich dazu führt die OncoQuick®-Zentrifugation zu einer stärkeren Reduktion der gesammelten Zellen mit einem Abreicherungsfaktor von 632 für WBC, 12.778 für RBC und 14 für Blutplättchen, verglichen mit den Fraktionen des unbehandelten Gesamtbluts.

Tumorzellgewinnung nach Dichtezentrifugation

Die Wiederfindung von $2,7 \times 10^5$ und $2,7 \times 10^6$ gespiketen Tumorzellen war vergleichbar für beide Zentrifugationsmethoden (Bereich 70% bis 90%) mit einem Mittelwert von 84% für Ficoll® und 87% für OncoQuick®, analysiert mit der hämatologischen Analysevorrichtung (Figur 1).

Nachweis disseminierter Tumorzellen

Immunocytochemie

Mikroskopische Quantifizierung der abgetrennten MNCs mit einer Neubauer Zellkammer ergab eine mittlere Menge von 2×10^5 Zellen nach OncoQuick®-Zentrifugation und 1×10^7 Zellen nach Ficoll®-Zentrifugation. Zur weiteren ICC Evaluierung wurde eine maximale Zellzahl von 2×10^5 Zellen pro Deckgläschen zentrifugiert. Dementsprechend konnten alle MNCs, die durch OncoQuick® abgetrennt wurden, auf ein bis zwei Deckgläschen zentrifugiert werden, wohingegen ungefähr 50 "Cytospins" zur Untersuchung aller MNCs, die durch Ficoll® abgetrennt wurden, notwendig waren. In "spiking"-Experimenten mit 100 und 1.000 Tumorzellen in 10 ml Gesamtblut wurde eine mittlere Wiederfindungsquote von 42% (Bereich 25–70%) durch ICC bestimmt unabhängig vom verwendeten Anreicherungssystem. Nach Ficoll®-Zentrifugation wurden lediglich 1-2% der gespiketen Tumorzellen pro Deckglas nachgewiesen, wohingegen OncoQuick® den Nachweis von 25-70% der gespiketen Tumorzellen pro Deckglas erlaubte (Figur 2).

Beim Vergleich der zwei monoklonalen Antikörper, die zur Identifizierung der Tumorzellen verwendet wurden, wurde eine höhere Sensitivität für A45-B/B3 verglichen mit CK-20 in

Blut gefunden. Um die Nachweisgrenze für ICC zu bestimmen, wurden "spiking"-Experimente mit 10 und 100 gespiketen Tumorzellen in 30 ml Blut entsprechend den RT-PCR Experimenten durchgeführt. Mit dem monoklonalen Antikörper A45-B/B3 wurde in einer Reihe von fünf wiederholten Experimenten zweimal eine von 10 gespiketen Tumorzellen nach OncoQuick®-Zentrifugation gefunden, während keine von 10 gespiketen Tumorzellen mit dem monoklonalen Antikörper CK-20 oder nach Ficoll®-Zentrifugation identifiziert wurden.

Cytokeratin-20 RT-PCR

Die extrahierten mittleren Gesamt-RNA-Ausbeuten waren 20µg nach Ficoll®- und 1µg nach OncoQuick®-Dichtegradientenzentrifugation von jeweils 10 ml Blut. Die CK-20 RT-PCR Reaktion, die in diesem Beispiel verwendet wurde, war auf eine maximale Menge von 2 µg Gesamt-RNA-Ausbeute oder höchstens 30 µl RNA-Extrakt begrenzt. Daher konnte nur 10% der RNA Ausbeute nach Ficoll®-Behandlung in einer einzelnen PCR Reaktion analysiert werden, was der Analyse von lediglich ungefähr 1 ml Gesamtblut entspricht. Zur PCR Analyse von OncoQuick®-Präparationen konnte ungefähr 50% der erhaltenen RNA-Ausbeute in einer einzelnen PCR Reaktion analysiert werden.

Verdünnungsreihen mit der Colorektal-Krebszelllinie HT-29 zur Sensitivitätsüberprüfung von CK-20 RT-PCR ergab eine Nachweisgrenze von 10 gespiketen Tumorzellen in 10 ml Gesamtblut für Ficoll® Dichtegradientenzentrifugation (Figur 3). Entsprechend der überlegenen Abreicherung von Blutzellen durch OncoQuick®-Zentrifugation und die nachfolgende geringere Menge an Blutzell-RNA konnten die Blutvolumina auf bis zu 30 ml für OncoQuick®-Präparationen und RT-PCR-Analyse erhöht werden mit einer Nachweisgrenze von 10 gespiketen Tumorzellen in 30 ml Blut (Figur 3). Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Tumorzell-RNA in einer höheren Konzentration mit weniger kontaminierender Blutzell-RNA nach Blutpräparation mit OncoQuick® erhalten wurde, verglichen mit Ficoll®.

Spezifität von CK-20 RT-PCR nach OncoQuick®-Dichtegradientenzentrifugation

Dreißig Tumor-freie Blutproben wurden auf "falsch-positive" CK-20 Expression aufgrund von illegitimer Transkription oder Pseudogenen untersucht. Alle Proben, die durch OncoQuick®-Zentrifugation abgereichert wurden, waren negativ in der RT-PCR für CK-20 (0%), wohingegen 3 von 30 Proben (10%), die durch Ficoll®-Zentrifugation abgereichert wurden, positiv waren, obwohl diese Patienten nicht Krebs hatten.

Zur weiteren Untersuchung wurden die Zellen unterhalb und oberhalb der porösen Schicht von 5 Tumor-freien Blutproben nach OncoQuick®-Zentrifugation analysiert. Während die mononukleäre Zellfraktion der Interphase oberhalb der porösen Barriere in allen 5 Tumor-freien Blutproben nach OncoQuick®-Zentrifugation keine CK-20 Expression zeigte, exprimierte die Zellfraktion unterhalb der porösen Barriere CK-20 in allen 5 Proben. Die Untersuchung von 10 ml Blut, das mit 100 HT29 Kolon Krebszellen gespiked wurde, zeigte CK-20 Expression in der Zellfraktion oberhalb und unterhalb der porösen Barriere. Zusätzliche Quantifizierung der CK-20 Expression mit einer quantitativen Lightcycler CK-20 RT-PCR, um zu bestimmen ob eine erhöhte CK-20 Expression in der Fraktion unterhalb der porösen Barriere nach Tumorzell-"spiking" gefunden wird, ergab eine mittlere Anzahl von CK-20-Kopien von 3.000 bis 8.000 in der gespiketen oder in der ungespiketen Zellfraktion. Die Interphase (die Zellfraktion oberhalb der porösen Barriere) der Tumorzell-gespiketen Blutprobe enthielt eine CK-20-Kopienanzahl von 380.000, während keine CK-20 Expression in der ungespiketen Zellfraktion oberhalb der porösen Barriere gefunden wurde. Diese Daten zeigen, daß nach OncoQuick®-Zentrifugation keine CK-20 exprimierenden Tumorzellen unterhalb der porösen Barriere sind.

Klinische Anwendung

In peripherem Blut wurde CK-20 mRNA nach OncoQuick®-Dichtegradienten-Zentrifugation in 11 von 37 Patienten gefunden (30%). 26 Patienten (70%) waren negativ in beiden Blutproben. 6 von 22 Patienten (27%) mit oberem Magen-Darm-Krebs exprimierten CK-20 mRNA in Proben von peripherem Blut und Patienten mit unterem Magen-Darm Krebs zeigten eine CK-20 mRNA Expression in 5 von 15 Patienten (33%). Ein Vergleich mit histopathologischen Daten zeigte, daß 6 von 29 Patienten (21%) ohne klinische Evidenz für Fernmetastasen (pM0) CK-20 Expression zeigten, während 5 von 8 Patienten (63%) mit Fernmetastasen (pM1) CK-20 mRNA exprimierten ($p < 0,02$) (Tabelle 2).

Tabelle 2 zeigt den Nachweis von CK-20 mRNA im peripheren Blut von 37 Patienten mit gastrointestinalen Karzinomen, nach Aufreinigung mit OncoQuick®. Tumorpatienten mit Fernmetastasen exprimieren wesentlich mehr CK-20 mRNA (63%) als Tumorpatienten ohne Anzeichen von Fernmetastasen (21%) ($p \leq 0.02$; "chi-square-Test").

	Alle Patienten		Fernmetastasen pM1		Keine Metastasen pM0	
	n	%	n	%	n	%
Alle Patienten	37	100%	8	22%	29	78%
CK-20 positiv	11	30%	5	63%	6	21%
CK-20 negativ	26	70%	3	37%	23	79%

Beispiel 3

1. Patienten und Methoden

Patienten

Die Untersuchungsgruppe bestand aus 42 Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs, die zwischen November 2000 und Februar 2001 in der gynäkologischen Abteilung des Klinikums Bad Trissl behandelt wurden. Alle Frauen waren postmenopausal und erhielten hormonelle Behandlung, Chemotherapie oder chemoendokrine Therapie und Bisphosphonate. 13 Patientinnen hatten maligne Knochenläsionen als einzigen Metastasenort.

Knochenmarksaspiration und Immunzytochemie

Eine Standard-Knochenmarkspunktion wurde bei allen 13 Patientinnen, die maligne Knochenmetastase als einzigen Metastasenort hatten, nach Zustimmungserklärung durchgeführt. Die Punktion an beiden Spina iliaca anterior superior wurde unter örtlicher Betäubung durchgeführt. 5 ml Knochenmark wurden erhalten, und beide Proben von jeder Patientin wurden vor der weiteren Bearbeitung gepoolt. Mononukleäre Zellen wurden durch Dichtegradientenzentrifugation mit Ficoll isoliert. Die Anzahl der mononukleären Zellen wurde durch Zytozentrifugation auf Objektträger zentrifugiert. Die Zytospins wurden fixiert und dann mit dem Panzyokeratin monoklonalen Antikörper A45-B/B3 (Micromet, Deutschland) gefärbt. Zur Visualisierung der Antikörperbindung wurde die APAAP-Technik

benutzt (Cordell et al., 1984, J. Histochem. Cytochem.: 32, 219-229). Für jede Patientin wurden fünf Objektträger enthaltend insgesamt 2×10^6 mononukleäre Zellen von zwei unabhängigen Beobachtern untersucht.

Proben von peripherem Blut und Immunzytochemie

Zusätzlich wurden von allen 42 Patientinnen 20 ml Blutproben von der peripheren Ellenbogenvene abgenommen. Diese Patientinnen hatten Anzeichen von viszeralen und partiellen Knochenmetastasen. Die Blutproben von jeder Patientin wurden mit einem optimierten Dichtegradientensystem OncoQuick (Greiner BioOne, Deutschland) bearbeitet. Mononukleäre Zellen wurden vom Gesamtblut durch OncoQuick-Dichtegradientenzentrifugation isoliert und durch Zytozentrifugation auf Objektträger zentrifugiert. Epitheliale Zellen wurden mit dem monoklonalen Antikörper A45-B/B3 und der APAAP-Technik gefärbt. Aufgrund der verbesserten Depletion mononukleärer Zellen bei der Verwendung von OncoQuick im Vergleich zu Ficoll wurden alle mononukleären Zellen auf durchschnittlich zwei Objektträger enthaltend bis zu 2×10^6 mononukleäre Zellen zentrifugiert, die auch mikroskopisch von zwei unabhängigen Beobachtern untersucht wurden.

2. Ergebnisse

Zytokeratin-positive Zellen in Knochenmark und peripherem Blut

Zytokeratin-positive Zellen wurden bei 21 Patientinnen im peripheren Blut und bei 3 Patientinnen im Knochenmark nachgewiesen. Die Anzahl nachgewiesener Zellen in peripherem Blut lag zwischen 1 und mehr als 20 pro 10^6 Zellen. 1 Zytokeratin-positive Zelle pro 1×10^6 mononukleären Interphase-Zellen wurde in den zwei positiven Knochenmarksproben gefunden. 7 Patientinnen hatten negative Befunde im Knochenmark und peripheren Blut. 3 Patientinnen waren Zytokeratin-positiv im peripheren Blut und negativ im Knochenmark, wohingegen in 2 Patientinnen Zytokeratin-positive Zellenachweise im Knochenmark, nicht aber in peripherem Blut gefunden wurden.

Zytokeratin-positive Zellen und Metastasenort

9 von 14 Patientinnen mit Lebermetastasen, aber nur 5 von 16 Patientinnen mit Knochenmetastasen und 3 von 7 Frauen mit pulmonalem Metastasenort hatten positive Befunde im peripheren Blut. Diese Daten zeigen einen signifikanten Unterschied in der Nachweisrate Zytokeratin-positiver Zellen in peripherem Blut von Brustkrebspatientinnen

mit hepatischer Tumorstreuung im Vergleich mit anderen metastatischen Manifestationen. Keine klare Korrelation konnte zwischen der Anzahl nachgewiesener Zellen und dem Ort der Metastasen gefunden werden.

Zytokeratin-positive Zellen und Überlebensrate

15 der 42 untersuchten Patientinnen starben innerhalb eines nachfolgenden Zeitraums von 9 Monaten. Alle verstarben aufgrund krebsspezifischer Ursachen. 11 dieser Patientinnen hatten positive Befunde in peripherem Blut. 8 dieser Frauen hatten Lebermetastasen. Diese Daten zeigen, daß die Gegenwart Zytokeratin-positiver Zellen in peripherem Blut mit dem klinischen Folgezustand assoziiert ist.

Schlußfolgerung

Dichtegradientenzentrifugation mit OncoQuick in Verbindung mit immunzytochemischer Färbung erlaubt die Identifizierung isolierter Tumorzellen in peripherem Blut von Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs. Frühere Techniken waren nicht in der Lage eine signifikante Menge zirkulierender Tumorzellen in peripherem Blut zu isolieren, da die Tumorzellen nicht ausreichend angereichert werden konnten. Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es möglich, Tumorzellen in peripherem Blut so stark anzureichern, daß in Kombination mit Detektionsmethoden wie Immunzytochemie, PCR oder Durchflußzytometrie die Identifizierung zirkulierender Tumorzellen möglich wird.

HEXAL Gentech ForschungsGmbH


Patentansprüche

1. Verfahren zum Nachweis von disseminierten Tumorzellen aus einer Körperflüssigkeit, worin
 - (a) Tumorzellen angereichert werden, indem ein Zellseparationsmedium, das eine Dichte im Bereich von 1,055 bis 1,065 g/ml aufweist, mit der Körperflüssigkeit überschichtet wird und zentrifugiert wird; und
 - (b) bestimmt wird, ob die angereicherten Zellen einen epithelialen Marker exprimieren.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der epitheliale Marker ein Zytokeratin ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Zytokeratin ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Zytokeratin 1 bis 20.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Zytokeratin-positive von Zytokeratin-negativen Blut-Zellen getrennt werden, wobei sich die angereicherten Tumorzellen in der gleichen Fraktion befinden wie die Zytokeratin-negativen Blut-Zellen.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Nicht-Tumorzellen, die wenigstens eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren, von Tumorzellen, die wenigstens eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren, abgetrennt werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zentrifugation in einem Gefäß durchgeführt wird, das durch eine poröse Barriere, einen Filter, ein Sieb oder eine Klappe in ein oberes und ein unteres Kompartiment geteilt ist, wobei das Zellseparationsmedium im unteren Kompartiment vorgelegt wird und die Körperflüssigkeit in das obere Kompartiment eingebracht wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die poröse Barriere, der Filter, das Sieb oder die Klappe eine Dicke von 0,5-10 mm, vorzugsweise von 1-5 mm aufweisen.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die poröse Barriere, der Filter, das Sieb oder die Klappe eine Porengröße von 20-100 µm, vorzugsweise 20-30 µm aufweisen.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die poröse Barriere, der Filter, das Sieb oder die Klappe aus einem hydrophoben Material bestehen oder mit einem hydrophoben Material beschichtet sind.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Zellseparationsmedium einen Farbstoff enthält, der das Zellseparationsmedium von der darüberliegenden Körperflüssigkeit farblich unterscheidbar macht und dadurch die Lokalisation der Interphase vereinfacht.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Schritt (b) in Einzel- oder Kombinationsanalyse bestimmt wird, ob die angereicherten Zellen wenigstens einen epithelialen Marker, wie z.B. eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestimmung, ob die angereicherten Zellen einen epithelialen Marker, wie z.B. ein Zytokeratin exprimieren, umfaßt, daß man mRNA aus den angereicherten Zellen revers transkribiert und eine PCR mit wenigstens einem für einen epithelialen Marker spezifischen, wie z.B. Zytokeratin-spezifischen Primer durchführt.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man die angereicherten Zellen mit einem monoklonalen Antikörper in Kontakt bringt, der spezifisch für einen bestimmten epithelialen Marker, wie z.B. ein bestimmtes Zytokeratin ist, und in Schritt (b) in Einzel- oder Kombinationsanalyse bestimmt wird, ob die angereicherten Zellen wenigstens einen epithelialen Marker, wie z.B. eines der Zytokeratine 1-20 exprimieren.
14. Kit enthaltend ein Zellseparationsmedium, das eine Dichte im Bereich von 1,055-1,065 g/ml aufweist, und Mittel zum Nachweis der Expression wenigstens eines epithelialen Markers.


15. Kit nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der epitheliale Marker Zytokeratin ist.
16. Kit nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß es Mittel zum Nachweis der Expression von wenigstens einem der Zytokeratine 1-20 enthält.
17. Kit nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum Nachweis der Expression von Zytokeratin ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus monoklonalen anti-Zytokeratin-Antikörpern und Zytokeratin-spezifischen Primern.
18. Kit nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß weiterhin ein Waschpuffer, gegebenenfalls in konzentrierter Form, zum Waschen der angereicherten Zellen enthalten ist.
19. Kit nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß weiterhin wenigstens ein Zentrifugationsgefäß enthalten ist.

Figur 1

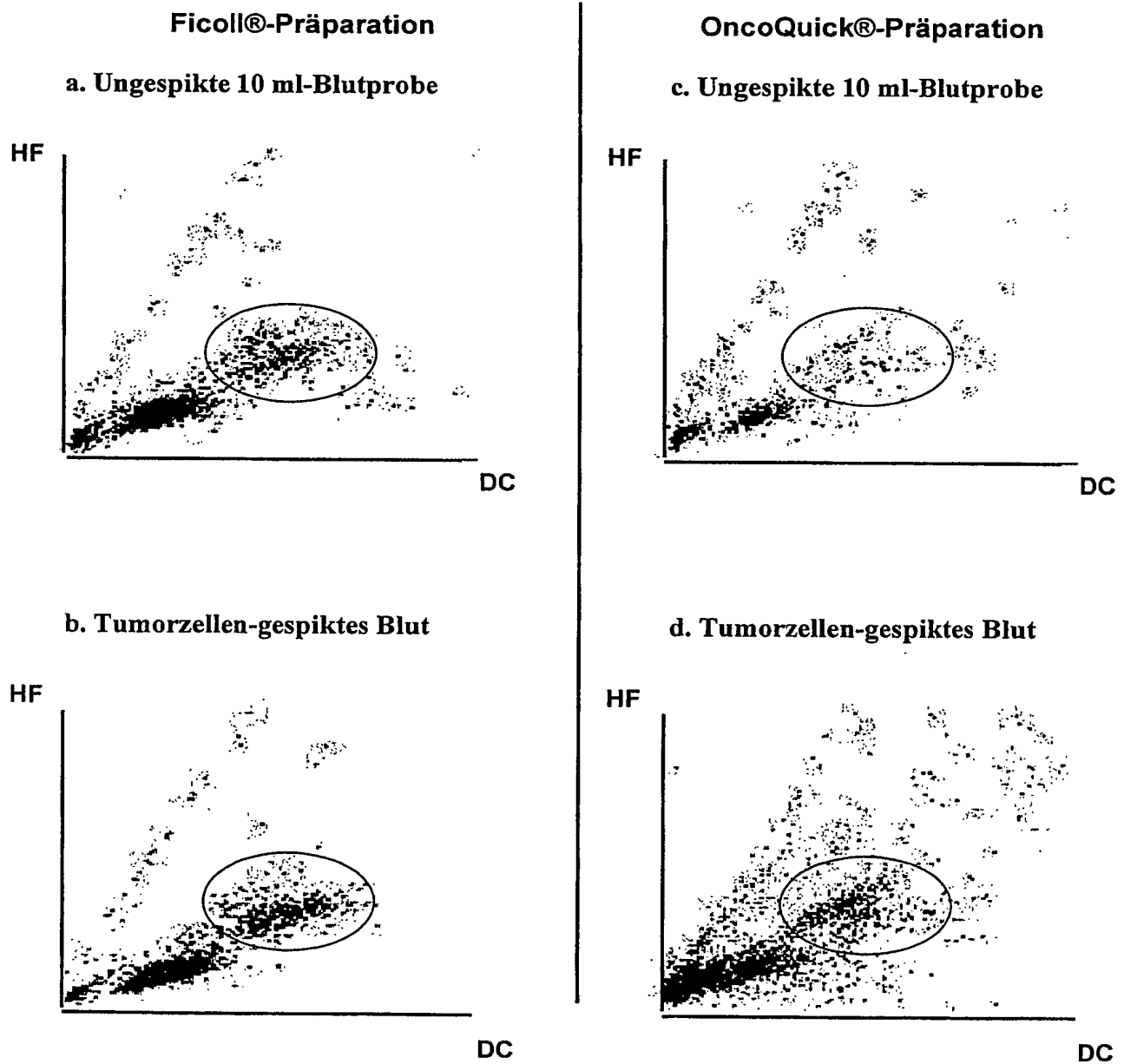




Figur 2

a. Cytospin nach Ficoll®-Zentrifugation (40-fache Vergrößerung)

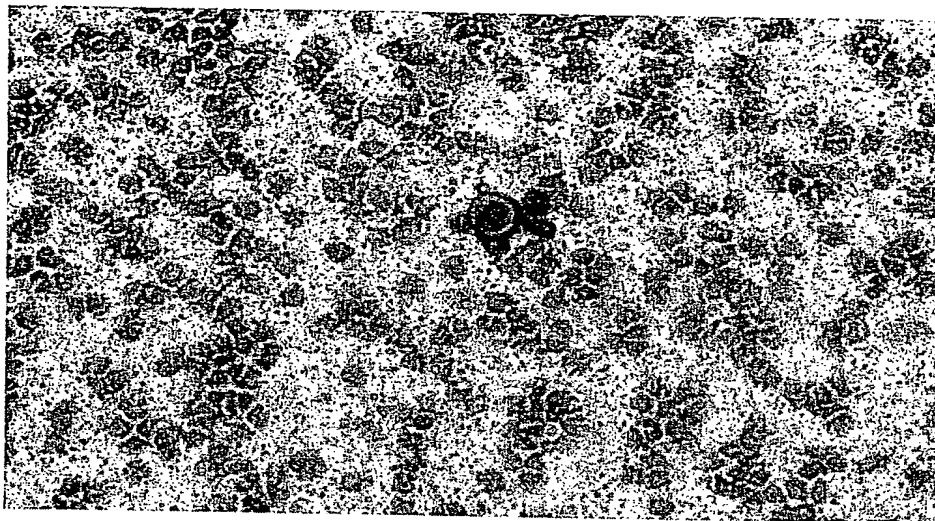

b. Cytospin nach OncoQuick®-Zentrifugation (40-fache Vergrößerung)

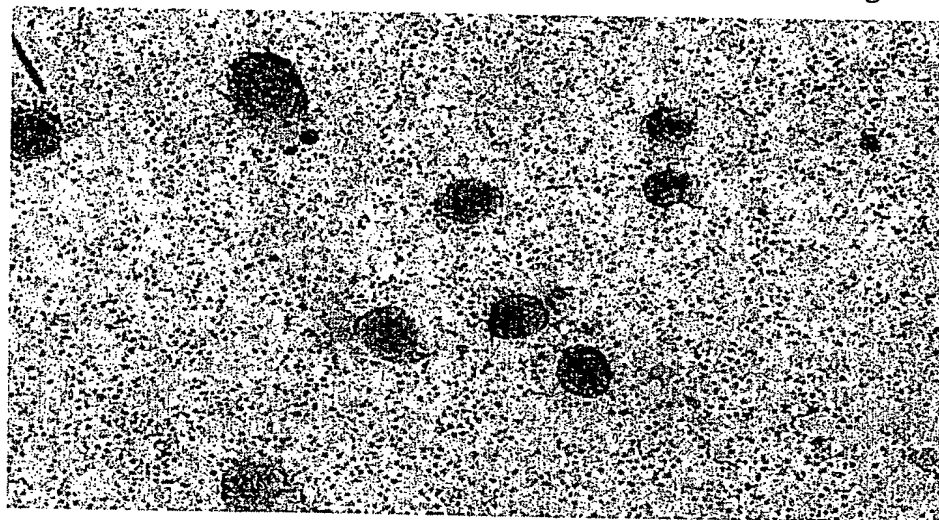

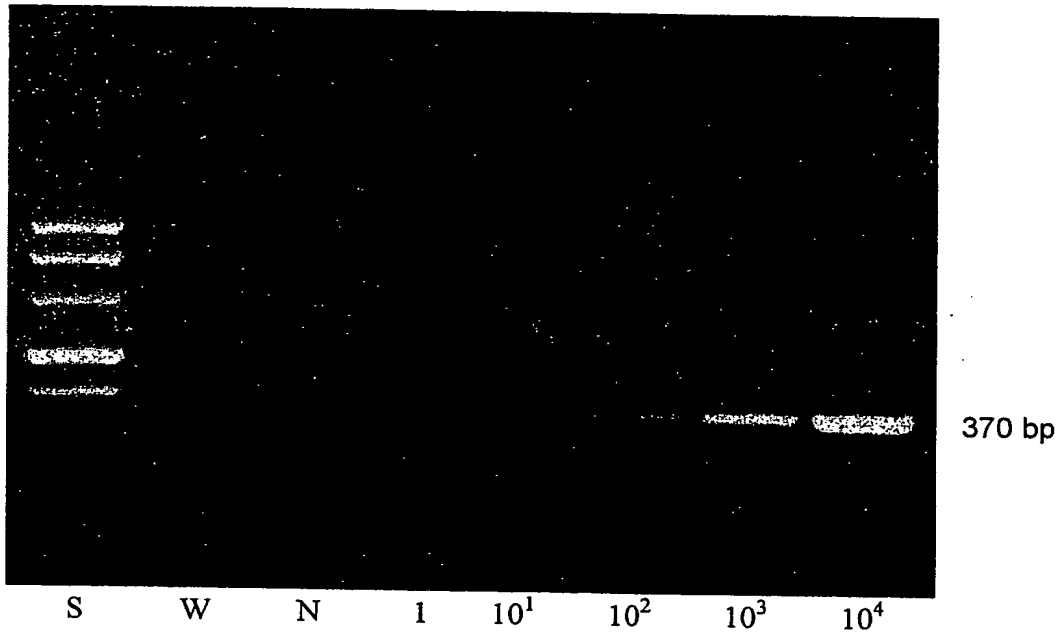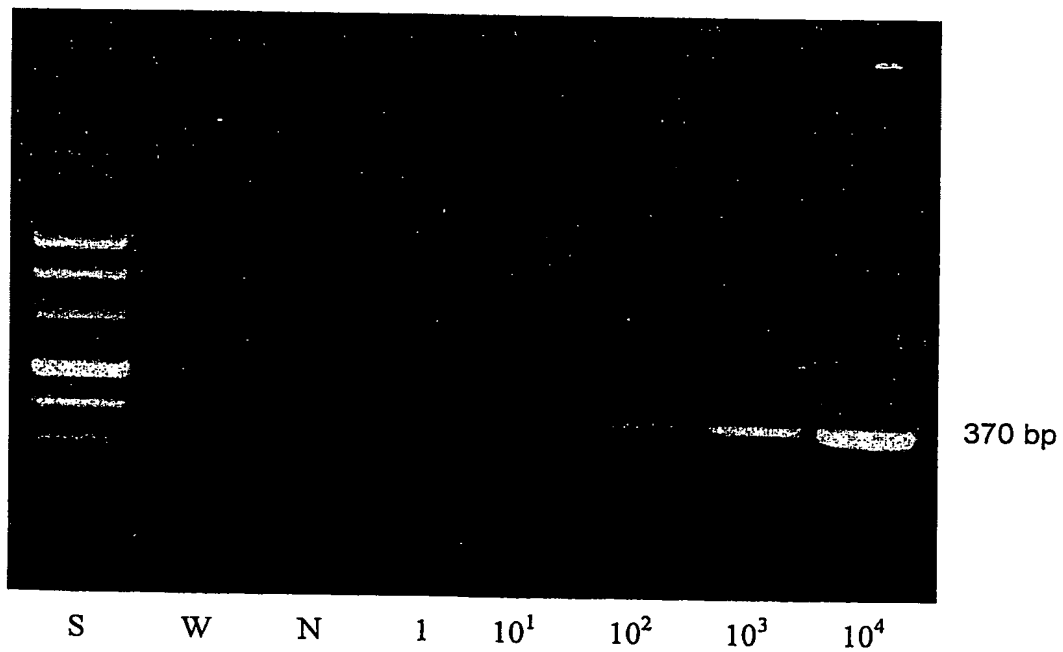Figur 3**a. CK-20 RT-PCR nach Ficoll®-Zentrifugation****b. CK-20 RT-PCR nach OncoQuick®-Zentrifugation**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08796

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N15/05 G01N33/574

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal, BIOSIS, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>WO 00 46585 A (DAHM MICHAEL W ; PHELPS ROBERT C (DE); BROCKMEYER CARSTEN (DE)) 10 August 2000 (2000-08-10) page 4, paragraph 1-3 page 5, paragraph 2-3 page 7, paragraph 2 - page 8, paragraph 2 page 9, paragraph 2 - page 11, paragraph 4 page 14, paragraph 2 page 15, paragraph 2 - page 16, last paragraph page 24, paragraph 4 - page 25, paragraph 2 page 27, paragraph 3 - page 28, paragraph 3 claims 1-35; figures 2-4; example 7</p> <p style="text-align: center;">----- -/--</p>	1-19

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 November 2003

Date of mailing of the international search report

16/12/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Goetz, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08796

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>GOETZ ALEXANDER W ET AL: "Enrichment of disseminated breast cancer cells from human peripheral blood by advanced density gradient centrifugation"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH ANNUAL MEETING, vol. 43, March 2002 (2002-03), page 733, XP002261837</p> <p>& 93RD ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH; SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA; APRIL 06-10, 2002</p> <p>ISSN: 0197-016X</p> <p>siehe auch die entsprechende Posterpräsentation, zu entnehmen online aus</p> <p>http://www.hexal-gentech.de/products/pub/index.html</p> <p>the whole document</p>	1-19
X	<p>US 5 840 502 A (VAN VLASSELAER PETER)</p> <p>24 November 1998 (1998-11-24)</p> <p>column 3, line 34 - column 5, line 65</p> <p>column 6, lines 22-51</p> <p>column 8, line 51 - column 10, line 18</p> <p>column 11, line 36 - column 12, line 67</p> <p>column 19, lines 18-67</p> <p>column 30, line 14 - column 31, line 59</p> <p>claim 7; figures 1-11</p>	1,2,6, 11,12, 14-17,19
X	<p>BISCHOFF J ET AL: "Detection of disseminated tumor cells in bone marrow and peripheral blood of patients with metastatic breast cancer"</p> <p>ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY, May 2002 (2002-05), XP002261838</p> <p>ORLANDO FL, USA</p> <p>the whole document</p>	1-3, 6-11, 13-19
P,X	<p>ROSENBERG R ET AL: "Comparison of two density gradient centrifugation systems for the enrichment of disseminated tumor cells in blood."</p> <p>CYTOMETRY, vol. 49, no. 4, 1 December 2002 (2002-12-01), pages 150-158, XP002261834</p> <p>& ISSN: 0196-4763</p> <p>the whole document</p>	1-19

-/--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08796

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 97 21488 A (ACTIVATED CELL THERAPY INC) 19 June 1997 (1997-06-19)	1,6
Y	page 3, line 8 - page 4, line 9 page 6, line 33 - page 9, line 24 page 12, line 20 - page 13, line 19 page 17, line 29 - page 20, line 33 page 22, line 19 - page 25, line 27 claims 1,8,9,13,17-19,22; figures 14,15; examples 9,11 -----	2,3, 11-14,19
Y	WO 96 17080 A (IMP CANCER RES TECH ; SELBY PETER JOHN (GB); BURCHILL SUSAN ANN (GB)) 6 June 1996 (1996-06-06) page 4, line 18 - page 6, line 17 page 7, line 15 - page 9, line 8 page 12, line 13 - page 13, line 11 claims 1-3,6,8,9,12 -----	1-19
Y	HEXAL GENTECH FORSCHUNGS-GMBH: ONCOQUICK-TM GEBRAUCHSANLEITUNG, 'Online! XP002261835 Retrieved from the Internet: <URL:http://www.hexal-gentech.de/products/ man_d.pdf> the whole document -----	1-19
Y	GÖTZ A: "Mit OncoQuick den Metastasen auf der Spur" BIOFORUM, vol. 24, 2001, page 394, XP002261836 GIT VERLAG GMBH, DARMSTADT the whole document -----	1-19

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08796

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0046585	A	10-08-2000	DE 19904267 A1	10-08-2000
			AU 3421400 A	25-08-2000
			CA 2361695 A1	10-08-2000
			WO 0046585 A2	10-08-2000
			EP 1181524 A2	27-02-2002
			JP 2002536635 T	29-10-2002
US 5840502	A	24-11-1998	US 5663051 A	02-09-1997
WO 9721488	A	19-06-1997	US 5789148 A	04-08-1998
			US 5663051 A	02-09-1997
			AU 707878 B2	22-07-1999
			AU 1415097 A	03-07-1997
			CA 2239729 A1	19-06-1997
			EP 0958046 A1	24-11-1999
			JP 2000502892 T	14-03-2000
			WO 9721488 A1	19-06-1997
WO 9617080	A	06-06-1996	WO 9617080 A1	06-06-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08796

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01N15/05 G01N33/574

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N C12Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, BIOSIS, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>WO 00 46585 A (DAHM MICHAEL W ; PHELPS ROBERT C (DE); BROCKMEYER CARSTEN (DE)) 10. August 2000 (2000-08-10) Seite 4, Absatz 1-3 Seite 5, Absatz 2-3 Seite 7, Absatz 2 - Seite 8, Absatz 2 Seite 9, Absatz 2 - Seite 11, Absatz 4 Seite 14, Absatz 2 Seite 15, Absatz 2 - Seite 16, letzter Absatz Seite 24, Absatz 4 - Seite 25, Absatz 2 Seite 27, Absatz 3 - Seite 28, Absatz 3 Ansprüche 1-35; Abbildungen 2-4; Beispiel 7</p> <p style="text-align: center;">----- -/--</p>	1-19



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

16/12/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Goetz, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08796

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>GOETZ ALEXANDER W ET AL: "Enrichment of disseminated breast cancer cells from human peripheral blood by advanced density gradient centrifugation"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH ANNUAL MEETING, Bd. 43, März 2002 (2002-03), Seite 733, XP002261837</p> <p>& 93RD ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH; SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA; APRIL 06-10, 2002</p> <p>ISSN: 0197-016X</p> <p>siehe auch die entsprechende Posterpräsentation, zu entnehmen online aus</p> <p>http://www.hexal-gentech.de/products/pub/index.html</p> <p>das ganze Dokument</p>	1-19
X	<p>US 5 840 502 A (VAN VLASSELAER PETER) 24. November 1998 (1998-11-24)</p> <p>Spalte 3, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 65 Spalte 6, Zeilen 22-51 Spalte 8, Zeile 51 - Spalte 10, Zeile 18 Spalte 11, Zeile 36 - Spalte 12, Zeile 67 Spalte 19, Zeilen 18-67 Spalte 30, Zeile 14 - Spalte 31, Zeile 59 Anspruch 7; Abbildungen 1-11</p>	1,2,6, 11,12, 14-17,19
X	<p>BISCHOFF J ET AL: "Detection of disseminated tumor cells in bone marrow and peripheral blood of patients with metastatic breast cancer"</p> <p>ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY, Mai 2002 (2002-05), XP002261838</p> <p>ORLANDO FL, USA</p> <p>das ganze Dokument</p>	1-3, 6-11, 13-19
P,X	<p>ROSENBERG R ET AL: "Comparison of two density gradient centrifugation systems for the enrichment of disseminated tumor cells in blood."</p> <p>CYTOMETRY, Bd. 49, Nr. 4, 1. Dezember 2002 (2002-12-01), Seiten 150-158, XP002261834</p> <p>& ISSN: 0196-4763</p> <p>das ganze Dokument</p>	1-19

-/--

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08796

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 97 21488 A (ACTIVATED CELL THERAPY INC) 19. Juni 1997 (1997-06-19)	1,6
Y	Seite 3, Zeile 8 - Seite 4, Zeile 9 Seite 6, Zeile 33 - Seite 9, Zeile 24 Seite 12, Zeile 20 - Seite 13, Zeile 19 Seite 17, Zeile 29 - Seite 20, Zeile 33 Seite 22, Zeile 19 - Seite 25, Zeile 27 Ansprüche 1,8,9,13,17-19,22; Abbildungen 14,15; Beispiele 9,11 -----	2,3, 11-14,19
Y	WO 96 17080 A (IMP CANCER RES TECH ; SELBY PETER JOHN (GB); BURCHILL SUSAN ANN (GB)) 6. Juni 1996 (1996-06-06) Seite 4, Zeile 18 - Seite 6, Zeile 17 Seite 7, Zeile 15 - Seite 9, Zeile 8 Seite 12, Zeile 13 - Seite 13, Zeile 11 Ansprüche 1-3,6,8,9,12 -----	1-19
Y	HEXAL GENTECH FORSCHUNGS-GMBH: ONCOQUICK-TM GEBRAUCHSANLEITUNG, 'Online! XP002261835 Gefunden im Internet: <URL:http://www.hexal-gentech.de/products/ man_d.pdf> das ganze Dokument -----	1-19
Y	GÖTZ A: "Mit OncoQuick den Metastasen auf der Spur" BIOFORUM, Bd. 24, 2001, Seite 394, XP002261836 GIT VERLAG GMBH, DARMSTADT das ganze Dokument -----	1-19

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08796

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 0046585	A	10-08-2000	DE	19904267 A1	10-08-2000
			AU	3421400 A	25-08-2000
			CA	2361695 A1	10-08-2000
			WO	0046585 A2	10-08-2000
			EP	1181524 A2	27-02-2002
			JP	2002536635 T	29-10-2002
US 5840502	A	24-11-1998	US	5663051 A	02-09-1997
WO 9721488	A	19-06-1997	US	5789148 A	04-08-1998
			US	5663051 A	02-09-1997
			AU	707878 B2	22-07-1999
			AU	1415097 A	03-07-1997
			CA	2239729 A1	19-06-1997
			EP	0958046 A1	24-11-1999
			JP	2000502892 T	14-03-2000
			WO	9721488 A1	19-06-1997
WO 9617080	A	06-06-1996	WO	9617080 A1	06-06-1996